



**智能碳素光线仪 CLPI-88 & CLPI-66**  
**产品说明书**

## 碳素光线仪 CLPI-88 型、 CLPI-66 型




### 特点功能：

液晶触摸屏	自动碳棒传送	自动升降调节	自动斜角调剂
设定时间系统	光谱强度调节	背景音乐系统	安全排放系统
安全保护系统	蓝牙功能系统	手机联动控制	多规格聚光罩
10000LUX 光照度	6-18cm 之间规格碳棒均可使用		

## 智能碳素光仪操作说明


### 一、安装碳棒，如下图所示：

#### 1. 打开前盖：

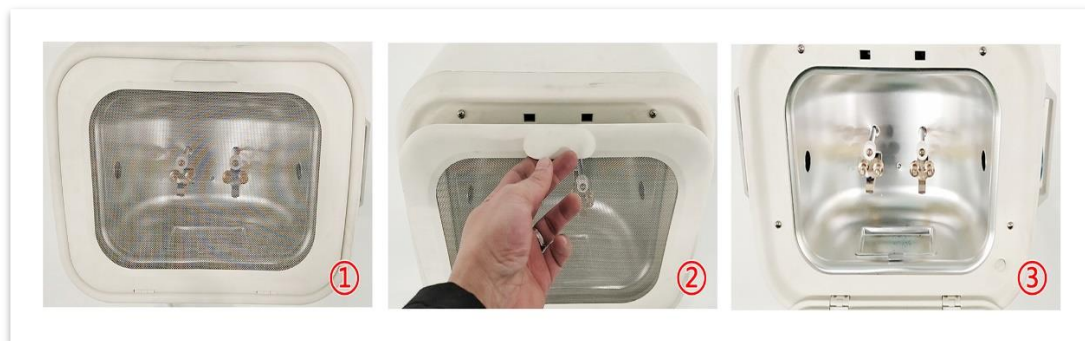

2. 用专用工具放置碳棒：使用撬铜工具下压碳棒传送轮，使用碳棒夹放置碳棒到传送槽中，松开撬铜固定碳棒。左右两边安装碳棒。



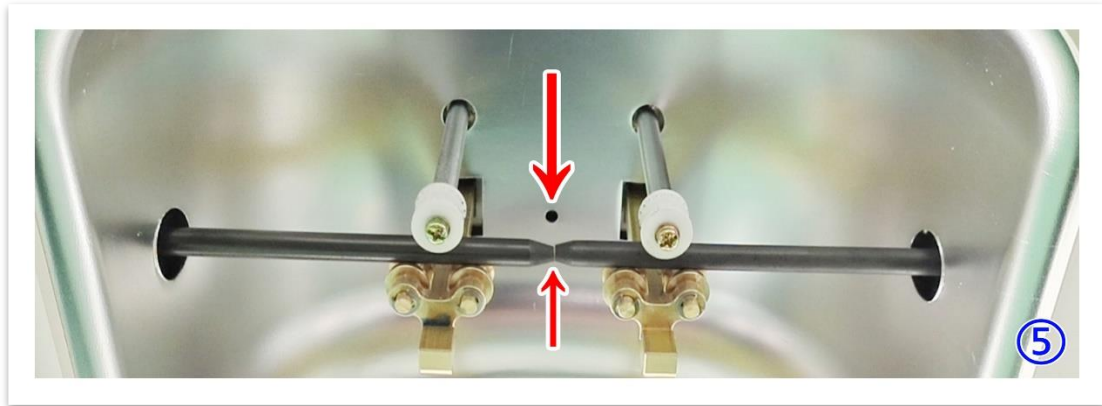

两只碳棒放置接触点尽量和反光罩中心孔在垂直线上

## 二、 插上 220V 市电， 如下图：



## 三、 开机工作：（触摸屏功能）

大丰非凡科技有限公司  
DAFENG FEIFAN TECHNOLOGY

20

五档位

①

②

肩周炎

颈椎病

腰间盘突出

风湿、类风湿性关节炎

坐骨神经痛

运动损伤

促进伤口愈合

白癜风  
牛皮癣

皮炎、湿疹

手足癣

烧烫伤

脉管炎

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

① 时间设置    ② 档位切换    ③ 旋转[俯角]    ④ 旋转[仰角]

⑤ 上升    ⑥ 升降停止    ⑦ 下降    ⑧ 音量调小

⑨ 背景音乐    ⑩ 音量调大    ⏻ 驱动停止开关

- 1、 时间设置：按+或-可以设置治疗时间，每按一次 5 分钟变化，最小时间设置 5 分钟，最大时间设置 40 分钟，时间设置只是在启动开关启动之前设置，设备启动之后工作过程中不能进行时间设置。
- 2、 档位设置：总共分为 3 档。1 档功率最小，光线强，热量小碳棒燃烧间距最小；2 档为默认档，光线和热量适中；3 档功率最大，热量最大；通常状态一般使用 2 档，但是不同碳棒有差异，也可以用 3 档工作；档位切换可以在开机前设置，也可以在机器工作过程中根据光和热量的大小进行切换。
- 3、 燃烧头上下旋转、升降及背景音乐在机器通电后，任何时候都可以实现这些功能。


#### 四、 手机 APP 操作：

1. 安装本产品 APP

2. 开启蓝牙




1. 启动 APP 如下图： 点击与设备蓝牙连接按钮、 点击蓝牙连接

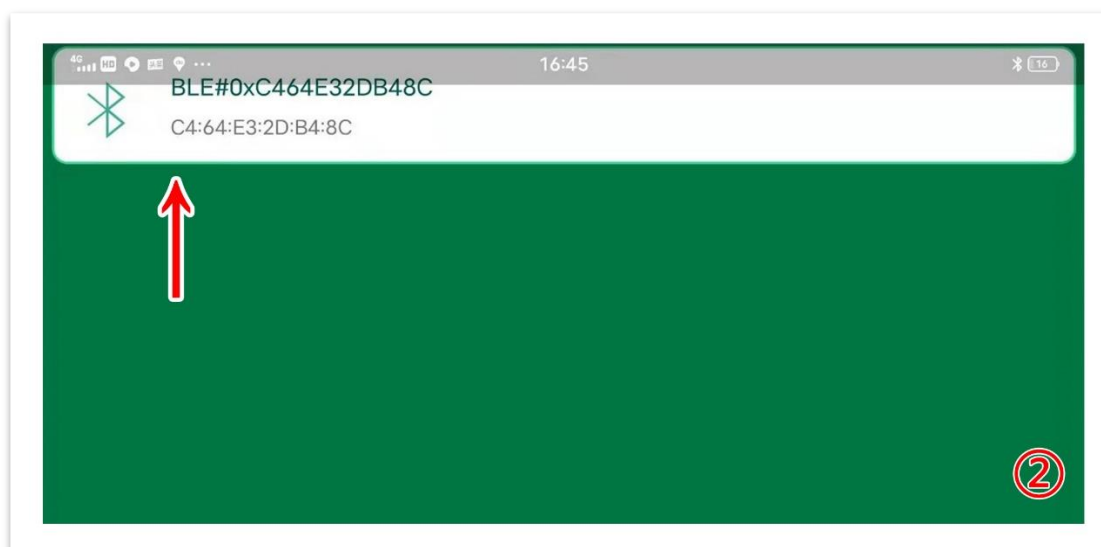

连接成功 正常操作界面和触摸屏一样，可以实现同触摸屏同步操作



### 五、聚光罩装配:

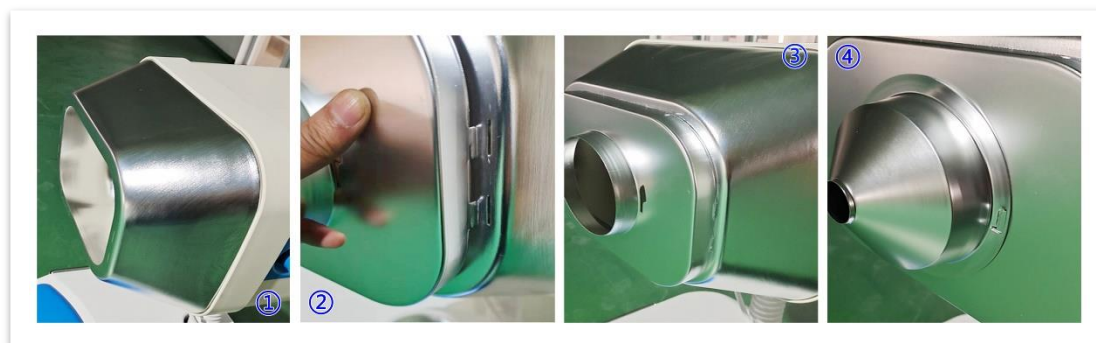

1号聚光罩：推进 [套进] 反光罩上

2号聚光罩:推进 1号聚光罩卡槽后向下推进

3号聚光罩: 装入 2号聚光罩槽旋转固定。摘聚光罩按相反顺序操作。





### 注 意 事 项:

1. 在燃烧头做水平旋转的时候，不要把电线缠绕太多圈数，以免把电线拉断。
2. 更换碳棒时切断仪器电源
3. 使用时不要有物盖住仪器
4. 使用单独安全电源插座或插排
5. 不要中重物压住电源线
6. 使用后不要马上打开前盖防止烫伤
7. 睡觉照射保次安全距离 防止烫伤
8. 出门要切断仪器电源
9. 使用仪器中不要随意拔掉电源
10. 使用仪器过程中不要直视光线以免伤害眼睛
11. 使用仪器中多换空气、保次室内新鲜空气
12. 不要把仪器当做烘干机使用
13. 不要在浴室等湿度高的场所使用
14. 使用仪器过程中不要用手碰聚光罩和仪器前盖
15. 仪器上禁止使用易燃品
16. 不要随意拆机，改装仪器



## CLPI-88 智能碳素光仪参数

项 目	参 数	说 明
输入电压	AC220V	市电
功 率	200-400W	消耗功率
输入市电交流电流	1-1.5A	
输出交流电压	60-80V	
输出平均电流	6-9A	
体 积	600×650×1400mm	
重 量	38KG	

## CLPI-66 智能碳素光仪参数

项 目	参 数	说 明
输入电压	AC220V	市电
功 率	200-400W	消耗功率
输入市电交流电流	1-1.5A	
输出交流电压	60-80V	
输出平均电流	6-9A	
体 积	460×400×820mm	
重 量	26KG	

